

The AIVIA logo is rendered in a stylized, red, rounded font. The letters are connected, with the 'i' and 'v' having a dot above them. The background is a blurred hospital hallway with a defibrillator in the foreground on the right.

AIVIA

Protección del
desfibrilador



#FINDANAIVIA



50+
País



500,000
Aivias instalado



15
años de experiencia

AIVIA IN

El nuevo modelo de interior de la gama AIVIA

Nuevo diseño y un nuevo sistema de apertura ergonómico con asa integrada que permite un acceso rápido al DEA en una situación de emergencia.





3 años de autonomía (2Pilas AA/LR06)
Apertura de mantenimiento
Muy ligero (2Kg)



Interior
Fácil de instalar



Alarma
visual y sonora



Compatible
con todos los DEA




Compacto
Ancho: 34 cm
Altura: 41,5 cm
Profundidad: 20 cm

AIVIA GO

#READYTOGO

¿Estás seguro de que todos tus desfibriladores son actualmente Operacional? En caso de urgencia, tienes un sistema para localizar inmediatamente su DEA?

La Implementación a gran escala de DAE en lugares públicos aumenta la necesidad de monitoreo remoto. Nuevas tecnologías están ahora disponibles para monitorear estas implementaciones y reducir tiempos de respuesta del servicio de emergencia.

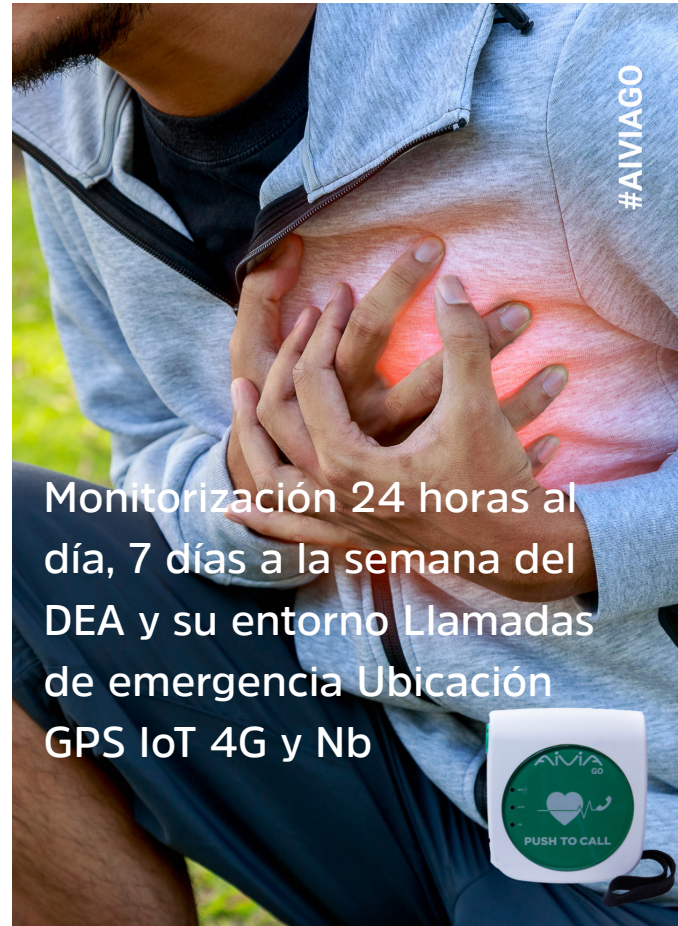


Monitorización 24 horas al día, 7 días a la semana del DEA y su entorno Llamadas de emergencia Ubicación GPS IoT 4G y Nb

Monitorización #Tiemporeal

Descubra AIVIA GO, la solución de monitoreo remoto de IoT 4G o Nb de la gama AIVIA, para garantizar que el desfibrilador esté accesible y operativo en todo momento.

En una situación de emergencia, el AIVIA GO permite la comunicación directa con los servicios de emergencia y la geolocalización en tiempo real.

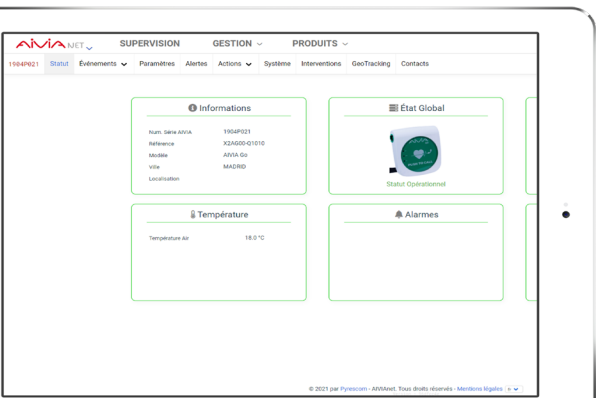

Llamadas de emergencia

Llamada de emergencia automática generada y comunicación de voz con los servicios de emergencia.



Geolocalización

Inicio de seguimiento GPS y alerta al retirar el DEA.



Monitoreo de DEA

Monitorización en continua del estado del DEA y su entorno (temperatura, puerta) Envío de alertas y notificaciones.



Autónomo

Funcionamiento De pilas. Autonomía de 24 meses.

*Opción:
Funcionamiento con batería recargable.*

Fuente de alimentación de 24V.



READY TO GO

Comunicación

Disponible en versión:

- 4G LTE.
- Nb-IoT.

Software

- Acceso a la plataforma de monitoreo Aivianet
- Puede usarse como API.

Dimensiones

- Ancho: 103 mm
- Altura: 94 mm
- Profundidad: 37mm
- Batería

Configurable

- Configuración de alertas y notificaciones
- Configuración del número de llamada
- Personalización de lo visual *(opción)*

Compatible con todos los DEA

- Conectado directamente al DEA
 - Sensor de temperatura
 - Sensor de presencia
- En opción :*
- Control del estado de la puerta

Accesorios

- Suministrado con su soporte de instalación
- En opción :*
- Maletín de transporte
 - Correa para DEA

Aivia

aivia.pyres.com

+33 4 68 68 39 68

direct@pyres.com

